

Uitleg Arion Slide X

Hulpmiddel voor het aantrekken van compressiekousen

U heeft een hulpmiddel voor het aantrekken van compressiekousen aangevraagd bij de Ontzorgcentrale. Hieronder vindt u de uitleg over het gebruik van dit hulpmiddel.

Stappenplan gebruik hulpmiddel

Let op! De Slide X kan alleen in combinatie met een Easyslide, gebruikt worden. In het stappenplan hieronder gaan wij er van uit dat u ook een Easyslide gebruikt.


Voor gebruik



- A. Zorg ervoor dat u voor de client zit en laat het been van de client rusten op uw bovenbeen.
- B. Om ongewenste druk te voorkomen, legt u een opgerolde handdoek onder het bovenbeen van de client.
- C. Maak een dubbele laag door de bovenkant van de SlideX om te vouwen en de magneten te verbinden.

Aantrekken van de kous


1. Plaats de Easy-slide over de voet.
2. Klik de magneten van de SlideX op elkaar en plaats de SlideX als volgt in de lengterichting op de bovenkant van het been:
 - De lange zijde aan de onderkant (op boven en onderbeen), de korte kant ligt bovenop;
 - De onderzijde rond de enkel vouwen zodanig dat de SlideX in de Easy-Slide valt;
 - De lus ligt op de knie van de client.
3. Schuif de kous over de Easy-Slide , tot dat de hiel van de kous op de juiste plaats zit.
4. Schuif de kous in een naadloze beweging van de Easy-Slide over de SlideX verder richting de knie, tot ongeveer 2 cm onder de knieschijf.
5. De client kan beginnen met helpen wanneer het elastische boord van de kous zich op de SlideX bevindt, door aan de lus te trekken terwijl de zorgverlener doorgaat met het verder opschuiven van de kous over het been.

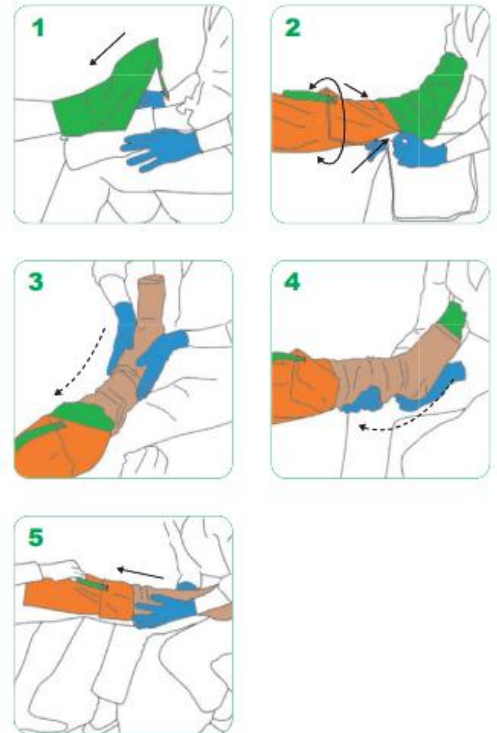

Instructievideo hulpmiddel

De video voor de Arion Slide X is online te kijken via de volgende link: [Arion SlideX, verlenghulp om medische compressiekousen aan te trekken \(NL instructies lieskous\) \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=ArionSlideX)

Mocht u beschikken over een toestel dat QR-codes kan scannen, dan kunt u de video ook bekijken door onderstaande barcode te scannen.

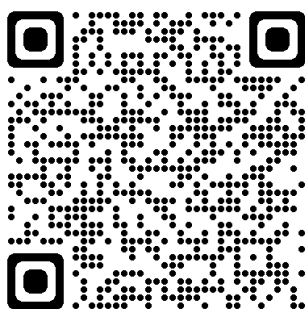

Vragen?

Komt u zelf niet verder met de bovengenoemde instructies? Mogelijk kan een naaste of bekende u hierbij helpen.

Komt u er ook met een naaste niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Ontzorgcentrale via 0883673000.

